

TuBo-Fix

non-adhesive



Tvådelad endotracheal Tub fixation



TuBo-Fix mellandel finns i 2 storlekar

TuBo-Fix komplett

Artikel Nr. 20 – 10

TuBo-Fix nackband

Artikel Nr. 20 – 15

TuBo-Fix mellandel normal

Artikel Nr. 20- 11 längd 26cm

TuBo-Fix mellandel extra lång

Artikel Nr. 20- 12 längd 34cm

För garanterat bästa grepp och optimalt fäste

Är det nödvändigt att använda den vita sidan

mot patientens hud och tub

kardborrebandet fäster mot Grön sida.

TuBo-Fix mellandel kan bytas ut separat

TuBo-Fix nackband kan användas en längre tid om så önskas.

FÖRDELAR

Säker, snabb och komfortabel användning

Ej självhäftande – idealisk för patienter med skägg och eller ömtålig hud

Latex fri – allergi fri, bakterieneutral, orsakar inte trycksår

Liten kontaktyta – mindre än 30 % av ytan är i kontakt med huden

Stabil – idealisk för långtidsbruk

Individanpassad – kan klippas för att passa alla patienter

Användarvänlig – applicerbar även med handskar

suitable also for double lumen tubes and larynx-masks


Kan steriliseras vid behov

Ekonomisk – utbytbar mellan del, nackband kan användas en längre tid

Tysk kvalitet

Patient Personal Ekonomi

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

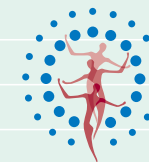

Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered

Tel: 031-710 44 70

Fax: 031-710 44 75

E-post: lars.renkvist@salubrious.se

www.salubrious.se

TuBo-Fix



Place the padding around the patient's neck with the **white** cotton surface facing the skin. If necessary, cut the excess part off.



Stick the adhesive tape on the inside of the middle part or around the tube. The tube has to be free of secretion, dirt and fat. Take the cover off.



possibility A:
Cross the middle part once above the tube.



possibility B:
Loop the strip via the perforation.



Fix the middle part with a slight tug on the padding using the Velcro® strip. Readjustment is possible at any time and without difficulty.



Completed fixation
In case of dirt, the middle part can be replaced separately. The padding might stay on the patient for a longer period of time.

Please visit our homepage www.novo-med-group.com for further modes of application

TuBo-Fix Application with Guedel Airway



Place the padding around the patient's neck with the **white** cotton surface facing the skin. If necessary, cut the excess part off.



Stick the adhesive tape on the inside of the middle part or around the tube. The tube has to be free of secretion, dirt and fat. Take the cover off.



possibility A:
Cross the middle part once above the tube.



possibility B:
Loop the strip via the perforation.
Insert the guedel airway.



Fix one end of the middle part on the padding using the Velcro® strip. Wrap the other end of the middle part around the guedel airway and fix it with a slight tug on the padding.



Completed fixation. In case of dirt, the middle part can be replaced separately. The padding might stay on the patient for a longer period of time.