

GEL AIR CONTOUR

Kombination av gel, luft & skum!

Dynan med skumbotteni




GEL AIR CONTOUR används för:

- Att ge god tryckavlastning.
- Att motverka skjuvning/ framåtgång.
- Brukare som är smärtpåverkade.
- Effektiv läkning av små sår.*
- Att ge "komfortabelt sittande."
- Stabilt sittande och positionering.

Motverka skjuvning/framåtgång
Stabilt sittande
Smärtmjukt sittande
Positionerande
Tryckfördelande
Tryckavlastande
Läkande små sår**
Sårhälande**

Dyna	Egenskaper								Anteckningar
Trio	X	X	X		X				
Xcell	X	X			X				
Easy	X	X	X		X	X			
Duogel	X	X	X		X	X	X		
Gelcell	X	X	X		X	X	X	X	
Gelcell G2	X	X	X	X	X	X	X		
Deep Comfort									
Gel Air Contour	X	X	X	X	X	X	X		

* Norton 1-2 ** Norton 3

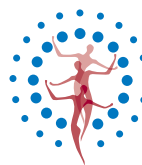

Salubrious
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se

Kombination av gel, luft & skumbas!

Gel Air Contour dynans konstruktion:

- Kombination av luft, silikongel & löstagbar skumbas.
- Unik kombination av luft, silikongel & skumbas eliminerar total genomsittning om läckage.
- Backventil förhindrar ofrivilligt luftutsläpp.
- Överdrag finns som luftgenomsläppligt och inkontinens.
- Antiglidbehandlat överdrag.
- Löstagbar skumbas, som är applicerad med kardborreband.

Gel Air Contour dynans egenskaper:

- Sval - rättar sig efter brukarens kroppstemperatur.
- Positionerande med hjälp av två ventiler.
- Skumbasen används vid extra spetsiga sittbensknölar, vid högre vikter samt där extra säkerhet önskas.
- Mycket god tryckavlastning.
- Stabil.
- Kan med fördel användas i duschen. (utan överdrag och stängd ventil - tag bort skumbasen)
- Endast 4 cm utan skumbasen, 7 cm inklusive den löstagbara skumbasen.
- Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Storlekar

ArtikelNr	Produkt	Dimensioner (cm) B/D/H	Vikt/kg (+/-5%)	EAN-kod
RG008-1414	Gel Air Contour	35x35x7	1,5	7350010174707
RG008-1515	Gel Air Contour	38x38x7	1,8	7350010174714
RG008-1616	Gel Air Contour	40x40x7	1,4	7350010174721
RG008-1618	Gel Air Contour	40x45x7	2,0	7350010174738
RG008-1717	Gel Air Contour	43x43x7	2,0	7350010174745
RG008-1816	Gel Air Contour	45x40x7	2,0	7350010174752
RG008-1818	Gel Air Contour	45x45x7	2,0	7350010174769
RG008-2018	Gel Air Contour	50x45x7	2,0	Inom kort 2008.

Rekommenderad brukarvikt max 130kg.

Tvättinstruktion överdrag  

Tvättinstruktion Gel Air Contour

Dynan samt skumbasen avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious vid användning av andra rengöringsmedel.



Fack 5021 448 51 Tollered
Tel: 031-710 44 70
Fax: 031-710 44 75
E-post: rehab@salubrious.se
www.salubrious.se