




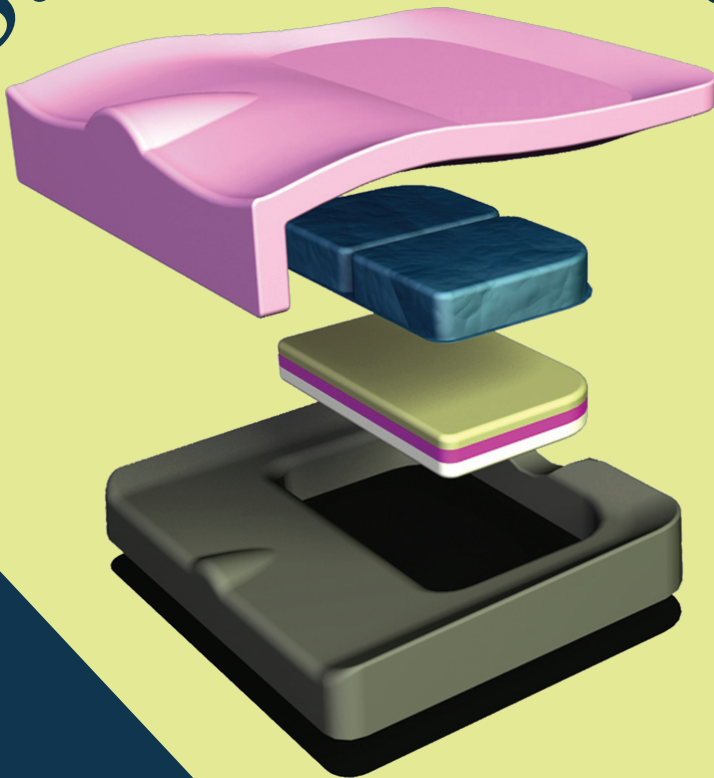


# Synergy Spectrum

Dynan med skum och gel

Stabil kombination!




## Används för:

-  stabilt sittande.
-  tryckavlastning.
-  "komfortabelt sittande"
-  brukare som är smärtpåverkade.
-  att motverka skjuvning/ framåtgångning.

Motverka skjuvning/framåtgångning  
 Stabilt sittande  
 Smärtmjukt sittande  
 Positionerande  
 Tryckfördelande  
 Tryckavlastande  
 Anpassa efter brukare  
 Positioneringskit

Dyna \ Egenskaper									Anteckningar
Solution 1	x	x	x		x	x			
Spectrum	x	x	x		x	x			
Structure 2	x	x	x		x	x	x		
Structure 2 med positioneringskit	x	x	x	x	x	x	x	x	

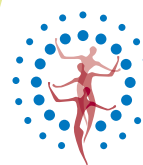

**Salubrious**  
 Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
 Tel: 031-710 44 70  
 Fax: 031-710 44 75  
 E-post: rehab@salubrious.se  
 www.salubrious.se

www.salubrious.se

# Synergy Spectrum

Dynan med skum och gel

## Spectrum dynans konstruktion:

- Skumbas med utskuren sittgrop, delat gelinlägg i sittgrop, överdel av tryckavlastande trögskum.
- Utskuren i skummet vid svanskotan, för att undvika tryck.
- Liten bendelare framtill på dynan.
- Inkontinensskyddad för god rekonditionering samt förlängd livslängd.
- Antiglidbehandlat överdrag med kardborreband.
- Luftgenomsläppligt yttre överdrag.
- Bottenplatta för mjuka underlag.
- Dynan är försedd med bärhandtag.

## Spectrum dynans egenskaper:

- Tryckavlastande dyna.
- Sval.
- Stabil.
- Tydlig märkning för placering och handhavande.
- Rekommenderad brukarvikt max 160 kg.
- 2 års garanti.

## Storlekar

**Sortimentöversikt och storlekar finns på eget dokument.**




Rekommenderad brukarvikt max 160 kg.  
Överdrag finns att köpa separat.

Tvättinstruktion överdrag  

## Tvättinstruktion Spectrum

Inre överdraget avtorkas med fuktig trasa och mildt desinfektionsmedel.

Kontakta Salubrious AB för godkända rengöringsmedel om frågor uppstår. Rengöringsanvisningar återfinns även i brukarmanualen.

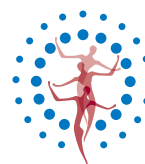

**Salubrious**  
Medicinteknik för vårdkvalitet

Fack 5021 448 51 Tollered  
Tel: 031-710 44 70  
Fax: 031-710 44 75  
E-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se)  
[www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)